



*Invacare*® | **Topaz**

Robusta y cómoda.



La silla *Invacare Topaz* ha sido diseñada para responder a las necesidades únicas de las personas obesas (hasta 318 kg). Es robusta gracias a su chasis de acero y su doble cruceta y cómoda con sus reposabrazos con gomas de espuma blanda y su tapizado de nylon.

La posición de las ruedas traseras así como el diseño del chasis garantizan una gran estabilidad en todos los anchos de asiento: 66,71 ó 76 cm.

### Maniobrable y segura


Las dos posiciones del soporte de rueda trasera permiten una modificación simple y rápida de la altura de asiento: 44,5 ó 49,5 cm.

### Reposabrazos reforzados

Los reposabrazos de la *Invacare Topaz* han sido diseñados para soportar el peso de una persona obesa y garantizan un posicionamiento adaptado.



## Características

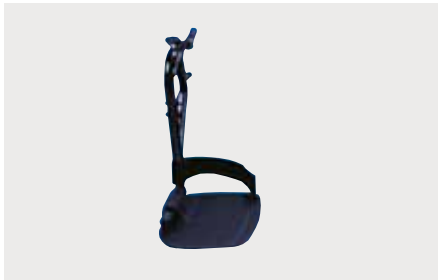

**Pescantes 70°**



**Reposabrazos desmontables**














**Chasis reforzado**

Doble cruceta y horquilla reforzada.

## Datos técnicos <sup>1</sup>

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	Ancho de asiento	Profundidad de asiento	Altura de asiento	Altura de respaldo	Altura de reposabrazos	Ancho total
<i>Invacare Topaz</i>	 660 / 710 / 760 mm	 460 / 510 mm	 445 / 495 mm	 410 / 430 / 460 mm	 230 mm	 Ancho de asiento + 240 mm

	Altura total	Largo total (con reposapiés)	Ancho plegada	Peso total	Peso máx. usuario
<i>Invacare Topaz</i>	 830 - 930 mm	 1250 mm	 370 mm	 40 kg	 318 kg



1. Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

### Color de chasis

Negro



### Color tapizado

Nylon negro

