

# Alegio™ NG



Ingeniería al servicio del confort.



Yes, you can.

Su diseño moderno y discreto hace que la cama **Alegio<sub>NG</sub>** se ajuste fácilmente tanto en ambientes domiciliarios como de cuidados institucionales.

Una de las características de la **Alegio<sub>NG</sub>** es el rango de altura optimizada 28 - 80cm. La posición más baja permite a pacientes de baja estatura o inestables poder entrar / salir con facilidad y seguridad de la cama. La altura máxima de 80cm permite al cuidador trabajar de forma segura.



### Flexibilidad : articulación, largo y altura

La **Alegio<sub>NG</sub>** tiene somier de cuatro secciones como estándar. La cama puede articular el cuarto plano en dos modalidades: eléctricamente **con movimiento sincronizado** de la rodilla o eléctricamente con elevación de los pies por **cremallera**. El somier puede extenderse 15cm con la utilización de un accesorio disponible. El rango de altura ha incrementado para beneficio de todos los usuarios.



### Medidas ergonómicas

El largo de las secciones del somier se rediseñaron considerando las recomendaciones y estadísticas antropométricas y mapas de presiones, que aseguran que el paciente esté cómodo cuando se siente o descansa en la cama.

### Facilidad de manejo

La **Alegio<sub>NG</sub>** se monta sin herramientas, las fijaciones entre la base y el somier facilitan el proceso. La **Alegio<sub>NG</sub>** tiene el kit de transporte que facilita su traslado y almacenamiento, también está disponible el kit de movimiento de camas montadas. Todas las barandillas cumplen con la norma de seguridad IEC60601-2-52.

## Características



### Sujeciones

Para facilitar el montaje y desmontaje rápido entre el somier y la base.



### Unión

Esta unión incrementa la estabilidad del somier.



### Kit de transporte


Para facilitar el transporte y almacenaje.



### Rango de elevación

De 28 a 80cm. Para mayor comodidad y seguridad del paciente.

## Versiones de articulación

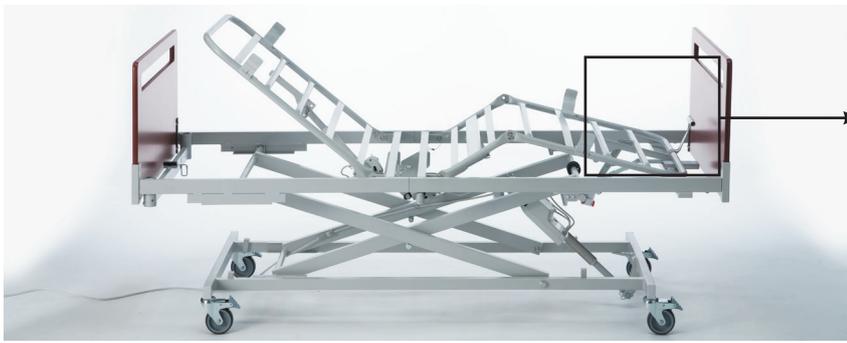


### Articulación Eléctrica con cremallera

El respaldo y la articulación de las rodillas se accionan eléctrica e individualmente, el cuarto plano se eleva manualmente gracias a la **cremallera**.



### Articulación con cremallera

Nuevo diseño de cremallera con intervalos más cortos.

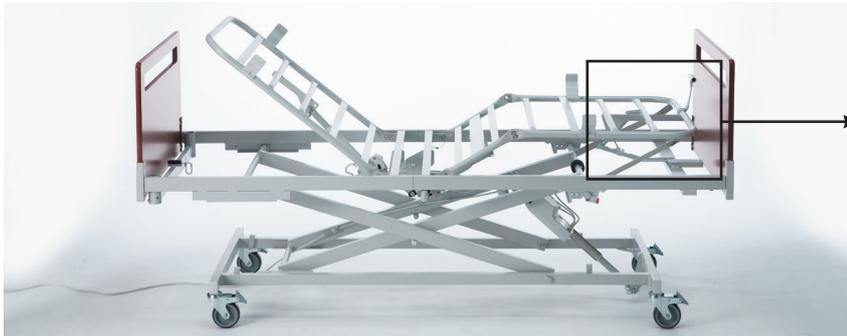

### Articulación Eléctrica Sincronizada

El respaldo y la articulación de las rodillas se accionan eléctrica e individualmente, el cuarto plano se eleva mediante **sincronización** con las rodillas.



### Articulación sincronizada

Eleva los pies simultáneamente con la rodilla.

## Opciones



### Cabecero/piecero Camila

Paneles de color cerezo. Compatibles con barandillas **Lisa**.



### Cabecero/piecero Vibeke<sub>NG</sub>

Paneles de color cerezo. Compatibles con barandillas **Verso II**.



### Cabecero/piecero Oda

Paneles de color haya. Compatibles con barandillas **Verso II**.



### Kit de extensión +15cm

Disponibles inserto de colchón como accesorio.



### Barandillas Lisa

Color cerezo, de largo completo, compatible con paneles Camila.



### Barandillas Verso II

Barandillas plegables de metal, cumplen con la Normativa de Seguridad IEC60601-2-52.



### Kit de transporte

Facilita el transporte y el almacenaje.



### Incorporador

El triángulo incorporador se puede ajustar en altura y profundidad.

## Opciones y características



### Freno centralizado

Freno centralizado en las cuatro ruedas con pedal.



### Incorporador con base

Independiente de la cama soporta usuarios de hasta 80kg.



### Porta suero

Puede ser colocado en la cama con el soporte incluido.

## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Ancho exterior <sup>1</sup> / Ancho interior	Largo exterior/ Largo interior	Ajustes de altura <sup>2</sup>	Dimensiones del somier	Angulo del respaldo	Angulo muslos	Angulo de las pies
 Invacare <b>AlegioNG</b>	 Invacare <b>AlegioNG</b>	 Invacare <b>AlegioNG</b>	 Invacare <b>AlegioNG</b>	 Invacare <b>AlegioNG</b>	 Invacare <b>AlegioNG</b>	 Invacare <b>AlegioNG</b>
900 mm 900 mm	2110 mm 2000 mm	280 / 800 mm	800-230- 300-670 mm	0 - 70°	0 - 33° <sup>3</sup>	0 - 18°

Peso	Peso max. usuario	Parte más pesada
 Invacare <b>AlegioNG</b>	 Invacare <b>AlegioNG</b>	 Invacare <b>AlegioNG</b>
78 kg <sup>4</sup>	SWL 170 kg 135 kg	35 kg

1. Sin barandillas
2. Ruedas 100mm
3. Con pistón en las piernas
4. Con cabecero/picero y sin barandillas

## Colores de cama y madera

Gris claro Ral 7035	Haya	Cerezo

**Nota/** La cama no debe ser utilizada por pacientes menores de 12 años o en pacientes corporalmente equivalentes a niños de 12 años o menos.

**Cumple con el estándar de  
seguridad IEC 60601-2-52**

Tel. (34) 972 493 214  
E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 11ª  
Valencia - CP: 46001  
España



**Yes, you can.**