

Flo-tech® Image



Cojín Slimline con bolsa de fluido



Yes, you can.

El cojín *Invacare Flo-tech Image* combina una base de espuma fina y moldeada con una bolsa de fluido que cubre la zona sacra, lo que aumenta la distribución de la presión y la inmersión de las tuberosidades isquiáticas. Este diseño ofrece un alto grado de protección a los usuarios con alto riesgo de desarrollar úlceras por presión. Este formato de cojín fino es ideal tanto para silla de ruedas como para silla de ruedas.

Características y opciones



Funda resistente a la penetración

La funda es bielástica, resistente al agua y permeable al vapor. Cuenta con una base antideslizante y asa de transporte.



Disponible en 23 tamaños

El Invacare Flo-tech Image está disponible en 23 tamaños, desde 360 x 330 mm hasta 460 x 410 mm. (Consulte la tabla de tallas para obtener más información).



Opción de compensador de hundimiento integral

Opción de compensador de hundimiento para adaptar el hundimiento en los asientos de sillas de ruedas y garantizar que el cojín esté correctamente colocado.



Ultra-fresh™ añadido a todos los cojines para protección anti-microbiana y contra el mal olor

Tratamiento antimicrobiano añadido a toda la espuma Flo-tech para ayudar a que sea resistente al crecimiento de bacterias causantes del mal olor. Proporciona una frescura más duradera.

Cojín delgado y anatómico de espuma y gel

Algunos usuarios prefieren un cojín delgado, ya que lo encuentran más compatible con sus actividades diarias. El Invacare Flo-tech Image combina las ventajas de una superficie superior de espuma anatómica con una amplia bolsa de fluido que cubre las zonas isquiática y sacra, ofreciendo mayor soporte y reduciendo las presiones máximas.

Superficie de asiento contorneada con bolsa de gel

Ofrece mayor estabilidad y soporte postural. Las almenas de espuma moldeada y el fluido se combinan eficazmente para reducir las fuerzas de cizallamiento y fricción sobre el tejido.

Datos técnicos

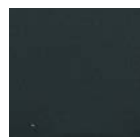
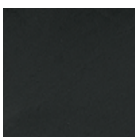
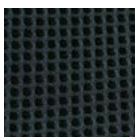
Para obtener información de preventa más completa sobre este producto, incluido el manual del usuario, consulte su sitio web local de Invacare.

Varios tamaños	Altura	Peso total del producto	Peso máximo del usuario ¹	Temperatura máxima de limpieza
				
Flo-tech Image Una gama de 50 tamaños	78 mm	1.82 kg	140 kg	80°

Fabricado según las normas europeas:
BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852: 1982 Crib 5

1. Los límites de peso máximo del usuario se establecen asumiendo que el cojín seleccionado tiene el ancho y la profundidad adecuados para el/los usuario(s) previsto(s).

Colores

Negro liso	Negro lavable	Espaciador negro	Tela Azul Báltico
			

(34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare España
Avenida del Oeste nº50, 1 1ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®