

Modulite®

Invacare®  Modulite™



Ajustabilidad máxima y
posicionamiento personalizado.



Flexibilidad máxima para adaptarse a todas las necesidades

El chasis telescópico es una tecnología ingeniosa que representa el corazón del asiento **Modulite™**. Su diseño ofrece un gran número de ajustes, fáciles de realizar y que permiten adaptar el asiento Modulite según las necesidades de cada usuario.



Chasis telescópico con módulo eléctrico

Existe una versión especial optimizada para el módulo de basculación de asiento y elevación. Este módulo garantiza una altura asiento-suelo lo más baja posible.

Asiento modular: parte delantera

Asegura un montaje fácil y unos ajustes precisos de cualquier tipo de pescantes o reposapiés: centrales o individuales.



Asiento regulable en anchura

El ancho del asiento es fácilmente regulable desde 38 cm hasta 53 cm mediante guías. Estas guías permiten montar y regular fácilmente los reposabrazos para que el paciente esté cómodamente sentado.

Asiento rígido multiajustable

Escoge entre una selección de bases de asiento

Modulite™ ofrece una gran variedad de soportes de asiento y cojines, que proveen mayor confort y alineamiento postural y posicionamiento.



Opción de asiento regulable en tensión

El asiento es fácilmente ajustable mediante cinchas para amoldarse a la postura del usuario, garantizando así confort y soporte. El módulo de asiento es ajustable desde 38 hasta 53 cm mediante tubos telescópicos.



Base de asiento rígida

La base ajustable se compone de 3 placas que permiten conseguir diferentes anchuras y profundidades.



Cojines de asiento **Matrix Flo-tech**

Está disponible una gama completa de cojines Matrix, según las necesidades del usuario: **Matrix Flo-tech Lite**, **Matrix Flo-tech Contour Visco** o el nuevo cojín **Matrix VI**. Estos cojines se pueden pedir directamente con la silla o por separado (ver lista completa de modelos disponibles en nuestro catálogo general).

Reclinación de respaldo,
manual o eléctrica con
compensación ergonómica.

El asiento **Modulite™** garantiza una flexibilidad máxima en lo que a posicionamiento se refiere.

Los soportes de tubos de respaldo son ajustables en anchura y en profundidad. Permiten montar diferentes módulos de respaldo para un posicionamiento idóneo del paciente. Los puntos de fijación que permiten reclinar el respaldo están situados en posición alta para garantizar un movimiento natural y suave y limitar las fricciones durante la fase de cambios posturales.



Respaldo abatible

Cuando se pide la opción de reclinación eléctrica, el respaldo se abate fácilmente sobre el asiento gracias a un mecanismo de «quick release» del pistón que facilita su transporte.



Opción de reclinación eléctrica

Los puntos de fijación altos, muy cerca de la articulación natural del cuerpo (cadera) garantizan un movimiento natural y reducen las fricciones. La profundidad del asiento se regula sin intervalos, deslizando los soportes del respaldo por las guías laterales.



Simplicidad y flexibilidad

Para usuarios con necesidades clínicas más básicas, la versión estándar del asiento **Modulite™** permite una regulación en anchura de los reposabrazos desde 43 hasta 48 cm.

El respaldo es ajustable en ángulo y en profundidad. Lleva un tapizado bicolor negro/gris muy atractivo, que también es ajustable en tensión.

El módulo de respaldo es desmontable, lo que facilita el transporte de la silla.

La base del asiento consta de una placa rígida para optimizar la eficacia del cojín y garantizar una correcta distribución de las presiones.

Tapizado de respaldo ajustable en tensión

El tapizado es ajustable en tensión para adaptarse a la morfología del paciente.



Respaldos

Invacare® **Matrix**

Una amplia gama de respaldos con un diseño atractivo y ligero para un posicionamiento y soporte perfectos.

matrix®
SEATING SERIES



Respaldo rígido

Rea® **Flex3**


Las placas del respaldo *Rea®* **Flex3** son ajustables en anchura desde 38 hasta 53 cm y en altura para adaptarse a todas las morfologías.



Características y opciones



Soportes de reposapiés ajustables en anchura

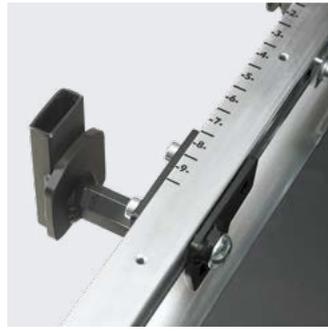

Soportes de reposabrazos ajustables en anchura y en profundidad mediante guías



Reposacabezas

Simple, envolvente o con soporte mejillas.



Soportes de tronco

Datos técnicos

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web www.invacare.es


Ancho de asiento	Profundidad asiento	Altura respaldo	Altura reposabrazos	Ángulo respaldo
380 mm, 430 mm ¹ , 480 mm, 530 mm ²	Ajustes sin intervalos Parámetros de fábrica: 410, 460, 510 mm	480 mm, 540 mm, 560 mm ³	270 mm hasta 390 mm	90° hasta 120°

1. Asiento fijo
2. + 50 mm según posición de los reposabrazos.
3. Respaldo Flex3 regulable en altura (100 mm) mediante placas.


Tapizado



Tapizado LK (bi material)

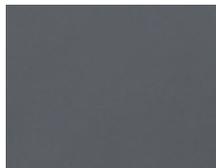


Dartex®

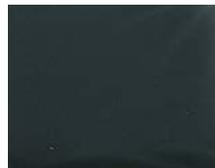

Tejido negro



Tapizado ajustable en tensión negro/gris (bi material)

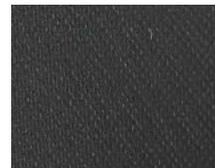

Tejido microventilado negro

Consultar disponibilidad de materiales según tipos de cojines (ver opciones en tarifa)

Modelos de sillas electrónicas



Invacare® **Pronto M41**



Invacare® **Bora®**



Invacare® **Kite®**



Invacare® **Storm®4**



Invacare® **TDX® SP2 / TDX® SP2NB**



Captura el código QR y descubra el vídeo del Módulo de asiento
Invacare® **Module**