

Action³_{NG} Rocking Chair



La silla de 6 ruedas desarrollada para la
autonomía del usuario

MANIOBRABILIDAD / CONFIGURABILIDAD / CONFORT



Yes, you can.®

La **Action³NG RC** es una silla manual de 6 ruedas diseñada a partir de la exitosa **Action³NG**. Esta silla comparte infinidad de opciones y accesorios con la reconocida gama Action, convirtiéndola en una silla plegable altamente configurable para satisfacer todas las necesidades individuales. Desarrollada para permitir un fácil acceso a los aros, la **Action³NG RC** ofrece mayor maniobrabilidad con menos esfuerzo para la propulsión. El excepcional diseño ofrece una posición de reposo única gracias a las ruedas adicionales en la parte trasera que permiten bascular fácilmente la silla para alcanzar un ángulo de asiento de 25°.

- ▶ Mayor maniobrabilidad en comparación con una silla estándar de 4 ruedas.
- ▶ Basculación mecánica que puede ser realizada por el paciente o el cuidador con un movimiento suave.
- ▶ Una solución única para los usuarios que buscan una silla de confort, ligera, plegable y fácilmente transportable.
- ▶ Pack "Comfort" incluyendo: respaldo reclinable rígido y acolchado Laguna procedente de la gama de sillas pasivas, reposapiernas elevables con paletas ajustables y reposacabezas.
- ▶ Las dos ruedas traseras de 5" garantizan una gran estabilidad de la silla, para un uso seguro en cualquier posición.

Maniobrabilidad mejorada

Con este diseño especial, el peso del usuario se puede distribuir de manera uniforme sobre las ruedas, lo que mejora la maniobrabilidad. Debido a sus ruedas centrales, el radio de giro es más corto en comparación con una silla de ruedas manual estándar, lo que permite un uso interior sin esfuerzo.

Ruedas centrales:

- ▶ Fácil acceso a los aros
- ▶ Las extremidades superiores están en una posición más natural y ergonómica
- ▶ Se necesita menos fuerza para la propulsión ofreciendo una mejor experiencia de conducción
- ▶ Prevención del dolor de hombros



Posición de descanso

Con ruedas delanteras de 5.5" o 6" y ruedas centrales de 22" o 24", la **Action³NG RC** también está equipada con dos ruedas traseras articuladas de 5" ofreciendo la posibilidad de bascular la silla hasta 25°. Para que el usuario bascule la silla, solo es necesario un pequeño impluso en los aros, desde atrás hacia delante. Alternativamente, un cuidador puede bascular la silla sobre las ruedas traseras sin esfuerzo.

Esta innovadora funcionalidad ofrece una posición de descanso en cualquier momento del día y permite un alivio en los puntos de presión. Durante la propulsión, unas palancas impiden que la silla pueda bascular de forma indebida para garantizar una total seguridad.



6

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Numerosas opciones de respaldos

- ▶ Respaldo fijo, abatible y ajustable en ángulo, acolchado o rígido

3 Reposabrazos abatibles y desmontables

- ▶ Con espuma ergonómica para facilitar las transferencias laterales


2 Palancas de seguridad

- ▶ Incluso en posición activada, permiten al usuario superar obstáculos de 65 mm.
- ▶ Deben desactivarse para poder bascular la silla



4 Maniobrabilidad optimizada

- ▶ Gracias a la posición adelantada de las ruedas centrales

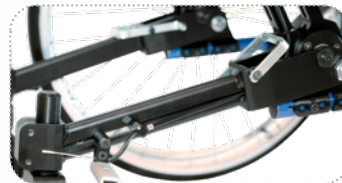

5 Frenos de tiro por cable

- ▶ Los frenos pueden ser activados incluso cuando la silla está basculada, para garantizar una total seguridad

6 Un diseño compacto y un peso ajustado

- ▶ El ancho de la silla es exactamente el mismo que la **Action³NG**:
 - Ancho total: ancho del asiento + 190 mm
 - Ancho total plegado: 295 mm

El peso total es de 17.6 kg, significa solo 3.4 kg más que la **Action³NG**. La longitud total ha sido optimizada para igualar una **Action³NG** con antivuelcos.



Características claves y beneficios




◀ Soportes de ejes de ruedas traseras

Estos soportes son ajustables en 3 posiciones para adaptarse a las diferentes morfologías. Estos ajustes determinan tanto el punto de vuelco como la posición de las ruedas traseras.



◀ Palancas de seguridad

Las palancas de seguridad permiten al usuario alcanzar la posición de descanso. Incluso cuando están activadas, permiten superar obstáculos de 65 mm.

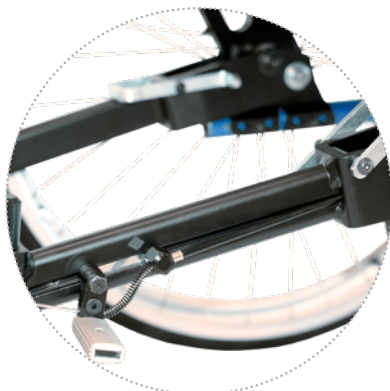

◀ Frenos accionados por cable

El exclusivo sistema de frenos accionados por cable sigue la posición de las ruedas centrales. Por lo tanto, no se necesita ningún ajuste cuando la silla está en posición de descanso.

Presentamos la familia **Action³_{NG} RC**

La Action³_{NG} RC esta disponible en dos modelos.

Action³_{NG} RC

Con una amplia variedad de opciones y accesorios para satisfacer las necesidades específicas de cada usuario, la **Action³_{NG} RC** está disponible con diferentes opciones de respaldo: fijo, plegable, reclinable por pistón de gas o ajustable en ángulo y abatible.



Action³_{NG} RC Comfort pack

La **Action³_{NG} RC Comfort pack** es una silla plegable, ligera, comfortable y de fácil transporte. El pack Comfort disponible en tarifa incluye: respaldo reclinable manualmente desde 0° hasta 30°, cojín de respaldo Laguna, resposapiés ajustables en profundidad y ángulo, y un reposacabezas tapizado negro suave.



Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es

							
Ancho de asiento ▼	Profundidad de asiento ▼	Ángulo de asiento ▼	Altura asiento/suelo ▼	Ángulo de respaldo ▼	Altura de respaldo ▼	Ángulo parte delantera del chasis ▼	
Action³NG RC	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	3°	460 - 485 mm	7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	350 - 510 mm	80° / 0 - 75°
							
Regulación de los reposapiernas ▼	Altura de reposabrazos ▼	Ancho total ▼	Ancho plegada ▼	Largo total ▼	Largo total sin reposapiés ▼	Altura total ▼	
Action³NG RC	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	230 / 170 - 295 mm	Ancho asiento + 190 mm	295 mm	1036 - 1124 mm	816 - 890 mm	810 - 1040 mm
							
Pendiente máxima ▼	Radio de giro ▼	Peso máximo del usuario ▼	Peso total ▼	Peso de transporte ▼			
Action³NG RC	4°	800 mm	125 kg	17,6 kg	11,2 kg		

Colores de chasis ▼



Tapizado ▼



Nota: los colores pueden variar ligeramente de los impresos.

Tel: (34) 972 49 32 00
 Fax: (34) 972 49 32 00
 E-mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
 C/ Areny s/n
 Poligon Industrial de Celrà
 1746 CELRÀ (Girona) - España



Yes, you can.