

**rea**<sup>®</sup>

# Clematis<sup>®</sup> Pro



Confort óptimo | Ajustabilidad sin esfuerzo | Diseño compacto



Yes, you can.<sup>®</sup>



# El modelo de referencia en el segmento de las sillas pasivas con basculacion de asiento!

Nuestra nueva *Rea Clematis Pro* ha sido diseñada para ofrecer a los usuarios una experiencia de conducción y de confort única. Gracias a los años de experiencia adquiridos, la nueva Clematis Pro se beneficia de todas las características de la Clematis, añadiendo más confort, estabilidad y seguridad. Su chasis compacto permite una maniobrabilidad óptima, especialmente en interiores. Las ruedas traseras están situadas en una posición más avanzada para garantizar un acceso facilitado a los aros para los usuarios que se autopropulsan.

## Confort inigualable gracias a su nuevo Respaldo modular

El nuevo respaldo modular de la Clematis Pro puede ser configurado de dos maneras: con placa rígida (versión Stock) o tapizado flexible (versión configurada), según la morfología y el posicionamiento que necesita el usuario. Ambos respaldos son ajustables en altura y reclinables a 30° por pistón neumático.

El respaldo con cinchas ajustables en tensión sigue disponible como opción (versión configurada).

### DSS® (Dual Stability System)

La tecnología DSS es única en el mercado. Consiste en un sistema de compensación ergonómica con unos puntos de fijación altos del respaldo y de los reposapiés -cerca de las articulaciones de la cadera y de la rodilla- que permite limitar el cizallamiento de la piel y las fricciones durante las fases de cambios posturales. Durante la fase de basculación, el asiento se desplaza hacia delante para garantizar una estabilidad óptima y una buena redistribución de las presiones.

### Versión Stock o Configurada

#### Clematis Pro Stock

**Respaldo rígido** ajustable en altura con cojín anatómico Laguna II. Cojín de asiento Flo-shape con 3 anchuras de asiento. Ruedas 12" o 24". Lista de accesorios disponibles.

#### Clematis Pro Configurada

**Respaldo flexible** o rígido con cojín anatómico Laguna II. Cojín de asiento **Contour Visco NG**. **Barra de empuje** ajustable en ángulo. Alto nivel de personalización gracias a numerosas opciones como el **freno tambor** disponible sin suplemento de precio.



Clematis Pro Stock



Clematis Pro Configurada

# 7

## CARACTERÍSTICAS

1

### Respaldo modular

- ▶ Reclinable a 30°
- ▶ Ajuste fácil y rápido para adaptar el respaldo a cada usuario
- ▶ Tres opciones de respaldo: respaldo rígido, flexible o con cinchas ajustables en tensión\*
- ▶ Se adapta de forma precisa a diferentes tipos de patologías

2

### Mayor Ángulo de asiento

- ▶ Ángulo de asiento hasta 25°
- ▶ Garantiza una máxima redistribución de las presiones
- ▶ Reduce el cizallamiento de la piel

7

### Reposabrazos ajustables

- ▶ Reposabrazos desmontables, regulables en altura
- ▶ Almohadilla estándar, regulable en profundidad

6

### Dual Stability System

- ▶ Maximiza la estabilidad en posición reclinada o basculada
- ▶ Puntos de fijación altos para minimizar el cizallamiento de la piel

5

### Chasis compacto

- ▶ Gran maniobrabilidad incluso en los espacios más reducidos
- ▶ Ideal para uso en interiores
- ▶ Antivuelcos abatibles para incrementar la estabilidad

3

### Base de asiento rígida

- ▶ Ajustable en profundidad
- ▶ Desde 420 hasta 480 mm
- ▶ Maximiza la eficacia del cojín de asiento

4

### Reposapiernas ajustables en ángulo

- ▶ Permiten elevar las piernas para mayor confort y posicionamiento cuando la silla está basculada o reclinada
- ▶ Soportes pantorrilla ajustables en altura y profundidad
- ▶ Paletas ajustables en altura, profundidad y anchura como estándar para adaptarse perfectamente a las necesidades del usuario

## Características adicionales

- ▶ **Nueva almohadilla de reposabrazos con diseño concavo y ergonómico (versión configurada)**
  - La almohadilla de reposabrazos de espuma moldeada y diseño concavo\* garantiza una buena sujeción del antebrazo incluso en las fases de basculación y reclinación de la silla
  - Fácil de limpiar y desinfectar
  - Almohadilla estándar (versión Stock)
- ▶ **Nuevo diseño del cojín de respaldo Laguna**
  - Mayor control lateral y posicionamiento del tronco

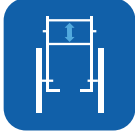
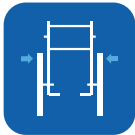


## Otras opciones disponibles

- Mesita desmontable
- Media mesita abatible con acolchado opcional
- Taco abductor desmontable
- Soportes de tronco fijos o abatibles
- Reposabrazos Hemi
- Sistema de bloqueo de la basculación
- Reposacabezas simple, envolvente o con soporte mejillas
- Funda para reposacabezas
- Cinturón pélvico
- Protectores de radios

# Datos Técnicos\*

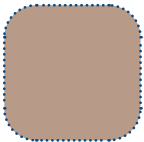
Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

|                         |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |   |   |   |   |   |
|                         | Anchura asiento ▼                                                                  | Profundidad asiento ▼                                                              | Altura asiento ▼                                                                   | Altura respaldo ▼                                                                    | Altura reposabrazos ▼                                                                |
| <b>Rea Clematis Pro</b> | 390/440/490 mm<br>(incluye ensanchadores 100 mm en cada lado)                      | 420-480 mm                                                                         | 400 - 450 mm<br>(Ruedas 24")                                                       | 570 mm -710 mm                                                                       | 230 - 350 mm                                                                         |
|                         |   |   |   |   |   |
|                         | Regulación de los reposapiés ▼                                                     | Ángulo de asiento ▼                                                                | Ángulo respaldo ▼                                                                  | Ancho total ▼                                                                        | Alto total ▼                                                                         |
| <b>Rea Clematis Pro</b> | 355 - 465 mm                                                                       | 0° - 25°                                                                           | 0° - 30°                                                                           | AA+200 mm<br>AA+220 mm<br>(freno tambor)                                             | Máx. 1200 mm                                                                         |
|                         |  |  |  |  |  |
|                         | Largo total con reposapiés** ▼                                                     | Peso total ▼                                                                       | Peso máximo del usuario ▼                                                          | Peso de transporte ▼                                                                 | Pendiente máxima con frenos de estacionamiento ▼                                     |
| <b>Rea Clematis Pro</b> | 1060 mm (Rueda de 24")<br>1040 mm (Rueda de 12")                                   | A partir de 30 kg                                                                  | 135kg                                                                              | A partir de 20 kg                                                                    | 7°                                                                                   |

\* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

\*\* Largo total sin reposapiés:  
Rueda de 24": 850 mm  
Rueda de 12" 830 mm

## Color chasis ▼



Beige perla



Dartex Negro TR26



Dual Stability System

Rea y DSS (Dual Stability System) son marcas registradas de Invacare® International. Rea Clematis Pro ha sido diseñada con sistema DD (Dual Stability System). Garantiza mayor estabilidad y seguridad para el usuario en fases de cambios posturales: basculación de asiento y reclinación de respaldo.

Tel: +34 972 49 32 14  
[contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 1ª 1ª  
46001 Valencia  
España



© 2024 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.  
Clematis Pro - ES - 04/2024

Yes, you can!

