

NordBed™ Kid

PROBADO Y
APROBADO
SEGÚN NORMA
EN50637:2017
POR TÜV



Seguridad y comodidad
para cada niño

SEGURA | AJUSTABLE | COMODA

INVACARE
Yes, you can.®

NordBed Kid

La cama segura que se adapta al niño

Nuestra cama NordBed Kid es ideal para ambientes de cuidados y domicilio.

Diseñada para adaptarse a los niños

Nuestra cama está disponible en diferentes configuraciones. Se puede elegir la altura y forma de las **barandillas** para adaptarse a las necesidades de cada niño.

Las opciones de barandillas incluyen, puertas plegables o deslizantes, con alturas de 40 u 80cm, para escoger aquella que se adapte mejor a su entorno y necesidad.

El **somier es ajustable** tanto en el respaldo como los muslos, ha sido diseñado con medidas antropométricas que brindan soporte anatómico y una comodidad excepcional.

De igual forma, están disponibles las protecciones de barandillas, elaboradas en material higiénico. Las protecciones se sujetan al interior de las barandillas con cintas de enganche, y ofrecen protección añadida para el niño que permanece en la cama cuando se manipula la cama y sus barandillas.

Seguridad

El parámetro más importantes en el proceso de diseño de la cama ha sido la **seguridad**. Desde el bloqueo del mecanismo de cierre de las barandillas plegables hasta el soporte del mando a distancia que previene el acceso del mando a los niños. Adicional a todo esto, la **Nordbed Kid** cumple con el estándar **EN50637:2017 para camas medicalizadas pediátricas** manteniendo un diseño moderno y domiciliario.

Entorno seguro para el cuidador

Nuestra **Nordbed Kid** es ajustable en altura desde la posición más baja 30cm que permite auto-transferencias hasta una altura de trabajo de 80cm para el cuidador. Todas las características, somier con articulación eléctrica, cuidado del mando, seguridad en los bloqueos, han sido diseñadas para asegurar un ambiente de trabajo seguro y cómodo para el cuidador.



Principales características de la NordBed Kid

El colchón ha sido especialmente diseñado para adaptarse a las necesidades de Nordb

1. Pestillo de la puerta

- ▶ Las puertas plegables tienen una cerradura con pestillo, que es fácil de operar por el cuidador.
- ▶ Diseñado para garantizar que no exista riesgo para el niño mientras está en la cama.

2. Mando a distancia, discreto y con bloqueo de funciones

- ▶ Los botones de color facilitan el reconocimiento de funciones
- ▶ Mecanismo de bloqueo de seguridad magnético garantiza un uso correcto y seguro exclusivamente por el cuidador.



3. Cabina de seguridad para el mando a distancia

- ▶ El mando puede ser guardado en la cabina de seguridad, fijada en el panel de la cama, para asegurarnos que únicamente el cuidador lo manipula.



4. Altura ajustable

- ▶ Desde tan bajo como 30cm para auto-transferencias en usuarios independientes, hasta 80cm de altura de trabajo del cuidador





Estándar de Seguridad EN50637:2017

El diseño se ajusta a los nuevos estándares Europeos de seguridad



Diseño

Diseño moderno y acogedor con un acabado de madera de haya.

Dacapo Kid
Especialmente
diseñado para
adaptarse a la
edad Kid



5. Escojer la barandilla

- ▶ Las opciones de barandilla permiten configurar la cama infantil considerando las necesidades.
- ▶ Las barandillas disponibles son deslizantes (hacia abajo) y plegables (tipo acordeón)
- ▶ La barandilla deslizante es de 40cm de alto y las barandillas plegables están disponibles en 40 y 80cm

6. Somier ajustable

- ▶ Las medidas del somier se han diseñado considerando medidas antropométricas, para incrementar la comodidad y el soporte al niño.

7. Movimiento del somier

- ▶ Con el fin de proporcionar un soporte óptimo al usuario, la NordBed Kid está equipada con 3 funciones eléctricas de serie : regulación de altura, respaldo y flexión de rodillas) y un reposapiés manual (cremallera)



Diseñada para la seguridad y la comodidad

Nordbed Kid ofrece mayor comodidad mientras cumple con los más rigurosos estándares Europeos.

Opciones de Barandillas

La **NordBed Kid** está disponible con diferentes barandillas para adaptarse a las necesidades infantiles. Las barandillas se han diseñado con mayor rigidez y resistencia, para cumplir con los requerimientos del estándar EN50637:2017.

Las opciones disponibles se detallan a continuación :

Plegables

- ▶ Las puertas se pueden abrir parcial o totalmente para facilitar el acceso mientras se mantiene la estabilidad de la cama y la seguridad del niño.
- ▶ El pestillo del bloqueo de seguridad es fácil de utilizar manteniendo la estabilidad de la barandilla.
- ▶ El pestillo ha sido diseñado para garantizar que el niño no se enganche ni se lesione mientras está en la cama.
- ▶ Disponible en dos alturas : 40 y 80cm

Deslizantes

- ▶ Un panel que se desliza hacia abajo en un movimiento para facilitar el acceso.
- ▶ Fácil sistema de liberación central permite al cuidador permanecer frente al niño.
- ▶ Disponible en altura 40cm.

Protecciones

- ▶ Protección con cobertura higiénica disponible para todas las versiones de barandillas y paneles, brindan una protección adicional para el niño y tranquilidad del cuidador.
- ▶ Las barandillas se pueden operar con las protecciones montadas.



Invacare **Dacapo Kid**

El colchón **Dacapo Kid** ha sido especialmente diseñado para adaptarse a la **Nordbed Kid**. El **Dacapo Kid** es un colchón diseñado en una capa de espuma cortada de alta resiliencia que reduce la fricción y redistribuye la presión al mismo tiempo que permite ventilación; adicional a todo lo anterior, garantiza la comodidad y es una solución duradera para niños/jóvenes.



Dacapo Kid - funda

- ▶ Impermeable
- ▶ Funda de poliuretano respirable
- ▶ Bi-elástica
- ▶ Lavable a 95°
- ▶ Cremallera totalmente oculta

Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa sobre este producto, incluido el manual de usuario, consulte la página web de Invacare.



Ancho exterior
Ancho interior ▼



Largo exterior
Largo interior ▼



Ajuste de altura ▼



Somier ▼



Espacio a suelo ▼



Angulo del respaldo ▼

Nordbed Kid

90/80cm

160/166cm

30-80cm

67-13-18-55cm

15cm

0-70°



Angulo del muslo ▼



Elevación pies ▼



Peso max. usuario ▼



Peso total
(sin paneles) ▼



Parte más pesada ▼

Nordbed Kid

0-12°

0-30°

70kg

95kg

55kg



Medidas ▼



Peso max. usuario ▼



Peso total del producto ▼


Dacapo Kid

1558 x 790 x100mm
1558 x 770 x100mm

70kg

6kg

Color del chasis ▼

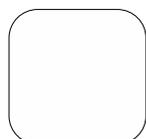

Blanco tráfico
RAL: 9016



Haya (madera)



Probado por TÜV según
norma EN50637:2017

Nota : los colores pueden variar ligeramente de los impresos.

Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 1ª 1ª
46001 Valencia
España



Yes, you can.®