

Raizer® II

Silla elevadora



Eleva a una persona caída en 30 segundos

Elevación segura y digna del suelo a la silla, operado por una sola persona.




Siéntase seguro y cómodo con Raizer II

Raizer II es una silla elevadora móvil con batería que ayuda a incorporar a una persona caída desde el suelo hasta una posición casi erguida en solo 20–30 segundos.

Raizer puede montarse y utilizarse fácilmente por un solo operador, sin necesidad de realizar esfuerzo físico, excepto brindar una mano

de apoyo al usuario. El diseño de Raizer facilita su montaje y manejo, además de permitir una limpieza rápida y sencilla.

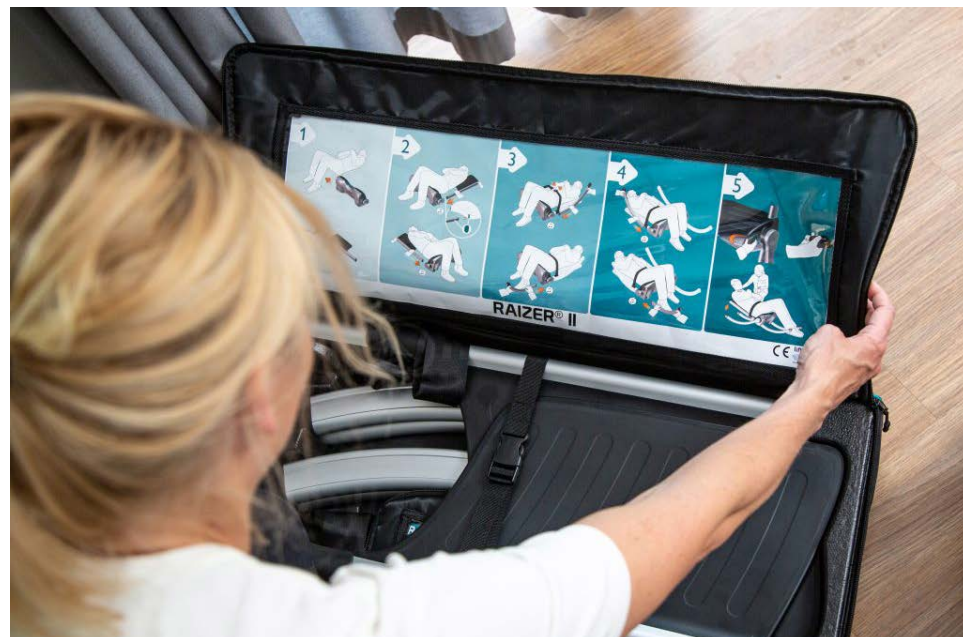

80 elevaciones por carga

Autonomía de hasta 80 elevaciones por carga. Una recarga de tan solo 10-15 minutos y el equipo dispone de energía para un elevación adicional.



Piezas idénticas, 2 patas y 2 respaldos

Montaje sencillo, todas las piezas son intercambiables garantizando siempre un montaje correcto.




> **Todos los materiales de las superficies** han sido diseñados para **facilitar la limpieza y desinfección**.

> **Cinturón de asiento adicional**, se puede montar para proporcionar una mayor estabilidad a la persona caída si es necesario.


> **Indicadores acústicos** e **indicadores led** para un correcto montaje

> **El mando a distancia** se guarda de forma segura en el lateral del asiento.

> **Disponibles fundas higiénicas** desechables como accesorio opcional.

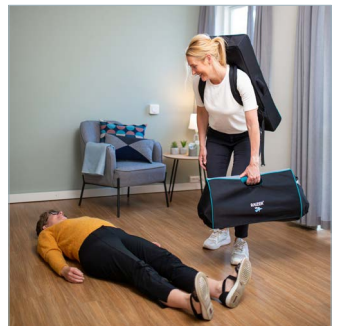


Paso 1 - Sitúe el asiento junto a la persona caída.

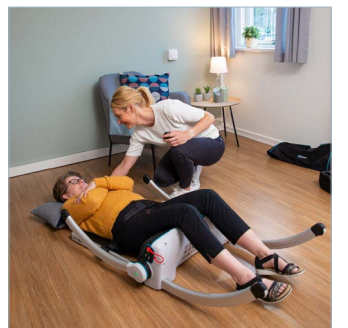

Paso 2 - Monte las patas y el respaldo alrededor de la persona.



Paso 3 - Asegure a la persona e inicie la elevación.

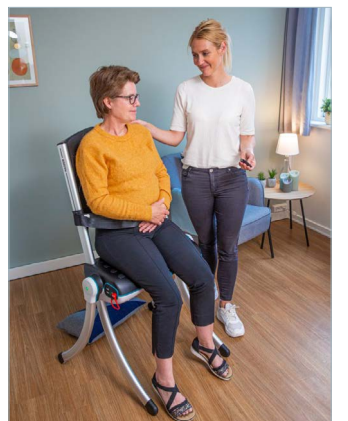

Paso 4 - La persona alcanza una posición casi de pie para facilitar la transferencia a una silla.

Datos técnicos ▼

				
Capacidad de elevación ▼	Tiempo de elevación ▼	Peso ▼	Número de elevaciones con una carga completa ▼	Tiempo de carga ▼
Max. 150kg	20-30 segundos	Asiento: 8.5kg Soporte de patas y respaldo : 4.5kg Total: 13kg	40 con carga max. Aprox.80 con una carga estándar	Hasta 6 horas

Invacare SAU
Av. del Oeste, 50 -1ª
46001, Valencia
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare International GmbH forma parte del grupo empresarial DHCare. Invacare International GmbH se reserva el derecho a modificar los modelos de productos existentes en cualquier momento. Las especificaciones de los productos pueden variar según la región. ©2026 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Raiser II_ES_03082026

