



Confidence in posture solutions

Azalea[®] Base



El chasis perfecto para
asientos a medida.



La **Rea Azalea Base** ha sido diseñada especialmente para usuarios que requieren un asiento a medida. Este modelo goza de todos los avances tecnológicos de la **Rea Azalea** como por ejemplo la basculación de asiento con transferencia de peso.

Es la silla ideal para usuarios que buscan estabilidad, seguridad y que requieren un asiento personalizado. La **Rea Azalea Base** está disponible a partir de un ancho de asiento de 34 cm y en 5 colores: gris perla, azul, arena, rojo y verde eléctrico.



Asiento a medida

Conozca a la última de las **Azalea**: la **Azalea Base**. Gracias a su chasis único con múltiples posibilidades de ajustes, la **Azalea Base** es ideal para acoplar cualquier sistema de asiento ortopédico. Además, es compatible con los accesorios de la **Rea Azalea** (excepto los soportes de tronco). Una de las características más destacadas es la basculación de asiento con transferencia de peso para mantener una estabilidad óptima de la silla, gracias al sistema exclusivo DSS (Dual Stability System).

Características y opciones



Numerosos puntos de anclaje

El asiento dispone de distintos agujeros de fijación y un espacio más abierto en la parte trasera.



Fijación arnés

Para acoplar diferentes tipos de arneses.









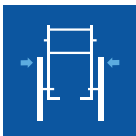









Placa de asiento con cuña

Permite conseguir un ángulo de asiento adicional de +5° en la parte delantera o trasera del asiento.

Datos Técnicos¹

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web www.invacare.es

	Ancho de asiento	Profundidad asiento	Altura asiento	Altura respaldo	Altura reposabrazos	Regulación de los reposapiés	Ángulo de asiento	Ángulo respaldo
Rea Azalea Base	 340/390/ 440/ 490 mm (+ 50/100 mm)	 380 - 450 mm 430 - 500 mm	 400/450 mm	 600 / 700 mm	 240 - 360 mm	 330 - 500 mm	 -1°+23° (22"/24") +1°+25° (16")	 0° - +30°
	Ancho total	Alto total	Largo total	Peso total	Peso máximo del usuario	Peso de transporte	Prueba de choque	Pendiente máxima con freno de estacionamiento
Rea Azalea Base	 SW ² +280 mm (24"+freno tambor) SW ² +260 mm (24") SW ² +220 mm (16")	 900-1300 mm	 900 - 1020 mm	 20 kg	 Max 135 kg	 15 kg	 ISO 7176-19	 7°

1. Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.
2. SW=Ancho de asiento

Color chasis

