

Softform Premier Visco



Reducción máxima de presiones.



El **Invacare Softform Premier Visco** es un colchón para prevención del desarrollo de escaras por presión. La principal cualidad del colchón es el adaptarse a la forma del cuerpo del usuario gracias al inserto de visco de alta densidad y sensible a la temperatura corporal. Esta característica proporciona comodidad y facilita la reducción de presiones minimizando los picos de presión.

Reducción de presiones y prevención

El inserto de visco termo-sensitivo se adapta a la forma del paciente maximizando el área de contacto del cuerpo y por lo tanto, facilitando la liberación de presiones en puntos específicos. Optimo para usuarios considerados de Alto Riesgo (calificación 20 escala de Waterlow).

Composición

Una estructura en forma de U de espuma de alta densidad azul da soporte y protege al **Premier Visco**. El corazón del colchón incluye una capa de espuma que brinda comodidad y el inserto de visco en la parte superior para absorber presiones.

Características y opciones




Funda sellada con alta frecuencia para prevenir filtraciones

Impermeable y transpirable, bi-elástica y biocompatible. Información impresa en la funda.



Construcción modular

Reemplazo fácil de las partes, incrementa la vida del producto.

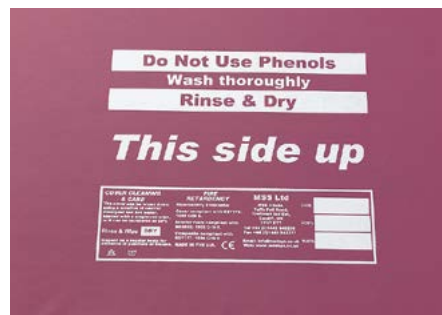

No requiere manipulación

El colchón no requiere ser girado o rotado, esto reduce la manipulación del producto.



Cremallera con solapa protectora

Reduce el riesgo de una posible filtración de líquidos, la cremallera permite separar fácil y completamente la parte superior de la funda, para lavarla o realizar inspecciones del colchón.



Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	Ancho	Largo	Altura	Peso total	Peso máx. usuario	Limpieza	Normas
Softform Premier Visco	880 mm	1950 mm	152 mm	13 kg	247.6 kg	80°	BS EN 597-1 (cigarrillo), BS EN 597-2 (cerilla) BS7177:1996 Crib 5 = Resistencia al fuego.
Softform Premier Visco	1200 mm	2000 mm	152 mm	13.5 kg	247.6 kg	80°	Densidad, dureza y altura: Blanco : 55 kg/m ³ // 80 N // 4 cm Rosa : 38-40 kg/m ³ // 105-135 N // 4 cm Azul : 38-40 kg/m ³ // 180-200 N // 7,2 cm

Color

Fucsia



* La atención de enfermería es fundamental en la prevención de úlceras por presión. Este colchón contribuirá positivamente al resultado de un plan de cuidado y prevención de úlceras por presión. Educación, juicio clínico y planificación de acciones basadas en la vulnerabilidad son factores fundamentales en la prevención de las úlceras por presión. Se pueden utilizar diferentes escalas de evaluación como un método formal de evaluación del riesgo de desarrollar úlceras por presión, y debería utilizarse siempre en conjunto con una evaluación informal (juicio de experiencia y conocimiento de enfermería). La evaluación informal se considera de gran importancia y valor clínico.