

matrx[®]
SEATING SERIES

Cojín Libra[®]



La nueva generación de cojines que ofrece un confort superior con un alto nivel de protección y posicionamiento.

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

- Diseño novedoso que combina una base de espuma con una bolsa de gel fluido para optimizar la protección de la piel, el posicionamiento y adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario.
- Incorpora una bolsa de gel fluido con compartimentos para mejorar la gestión de las fuerzas de cizallamiento.
- Diseño anatómico para favorecer el equilibrio y la estabilidad.
- Recomendado para todos los usuarios, incluso los más activos o los que presentan un riesgo elevado de desarrollar escaras.

Diseño único

- Base de espuma con diseño anatómico para maximizar la estabilidad del paciente y el posicionamiento de la pelvis.
- Espuma de alta resistencia y durabilidad con tratamiento Ultra-Fresh™ contra la proliferación de bacterias y olores.
- Bolsa de gel fluido con doble capa compartimentada para una protección máxima de la tuberosidad isquiática.

Beneficios funcionales

- Tope pre-isquiático para prevenir el deslizamiento y el cizallamiento de la piel.
- Soporte de los trocánteres mayores para favorecer la estabilidad lateral de la pelvis.
- Incremento de la parte trasera del cojín para evitar la rotación de la pelvis.
- Corte angulado de la parte delantera del cojín para adaptarse a usuarios con músculos isquiotibiales rígidos o a los que se desplazan mediante tracción podal.
- Diseño que favorece la alineación de las piernas.

Características y opciones



Envolvente

Superficie de apoyo incrementada para favorecer la distribución de las presiones.



Distribución de las presiones

Peso del paciente distribuido entre la pelvis y los muslos para reducir presiones en las zonas de riesgo.



Inmersión

Las prominencias óseas se sumergen confortablemente en la bolsa de gel fluido para una protección óptima.



Reducción de los riesgos de las fuerzas de cizallamiento

El diseño único del cojín permite controlar los movimientos de la pelvis y evita el deslizamiento.



Fiabilidad y ligereza


- Gel fluido no sensible a la temperatura. No hace falta mantenimiento.
- El cojín **Matrx Libra** es ligero (peso a partir de 1.6 kg) y compatible con un estilo de vida activo.
- Para usuarios con necesidades más complejas en cuanto a posicionamiento.
- Disponible una amplia gama de accesorios muy fáciles de usar.

Características y opciones



Parte delantera con borde angulado

Facilita las transferencias y la tracción podal.

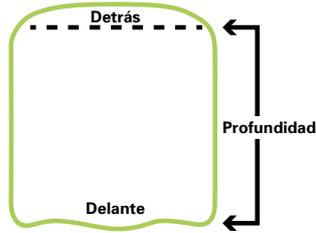

Dimensiones del cojín

Profundidad real = profundidad + 38 mm.



Borde posterior del cojín

Una extensión de 38 mm aumenta la superficie del cojín y permite estabilizar la bolsa de gel fluido en caso de basculación del asiento. Corte especial para el coxis.



Cuña frontal

Previene el deslizamiento y reduce las fuerzas de cizallamiento.



Cuña frontal cortada

Para usuarios con cadera con poca flexión y/o altura de asiento reducida para tracción podal.



Cuña cónica

Para fomentar la aducción.



Cuña cónica

Para usuarios con oblicuidad pélvica, se puede colocar en la parte trasera del cojín.



Cuñas laterales

Mejora la estabilidad lateral para favorecer la alineación de los muslos.



Bolsa de gel fluido adicional

Para conseguir una redistribución de las presiones en una zona más localizada o en caso de oblicuidad pélvica.



Perilla de abducción

Favorece una alineación adecuada de las caderas y de los muslos.



Bolsillo lateral para guardar pertenencias

Con tirador para fácil apertura.

Tallas disponibles *

Anchura x Profundidad (mm)
peso máximo usuario: 136 kg
Altura: 70 mm

360 x 310	380 x 410*	410 x 410*	430 x 410*	460 x 410*	480 x 410	510 x 410		
	380 x 430	410 x 430	430 x 430	460x430	480 x 430	510 x 430	530 x 430	560 x 430
360 x 360	380 x 460	410 x 460*	430 x 460*	460 x 460*	480 x 460	510 x 460		
360 x 410	380 x 510	410 x 510	430 x 510	460 x 510	480 x 510	510 x 510		

* Tallas en stock, tiempo de entrega reducido.

Las tallas sin* no están en stock. Confirmar plazo de entrega con Departamento de Atención al Cliente.

Datos técnicos


Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	Peso a partir de	Peso máx. usuario	Funda exterior lavable a máquina a	Funda interior
				
Matrx Libra	1.6 kg	136 kg	80°	limpiar con un trapo húmedo



Funda

Funda tejido negro impermeable

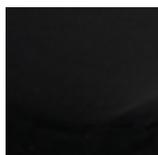

Funda micro ventilada y transpirable negra

